


КОММУНИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ГоуТок 9+ (GoTalk 9+)




Сороко Екатерина Николаевна,
зав. кафедрой коррекционно-развивающих
технологий ИИО БГПУ

Технические средства коммуникации

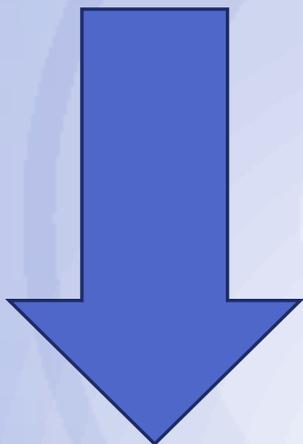

Стационарные

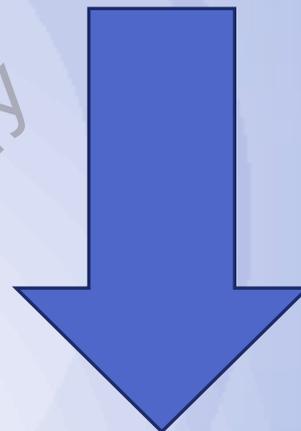

Портативные

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ГоуТок 9+ (GoTalk 9+) – портативное техническое средство коммуникации с речевым выводом



индикации уровня
(зеленые
светодиоды)

микрофон

динамик

основная
лексика (12
секунд каждое
сообщение)


Сменные
сообщения
(8 секунд
каждое
на всех 5
уровнях)

запись(красный
светодиод)

регулировка
громкости

кнопка
изменения
уровня

пластиковая
вставка

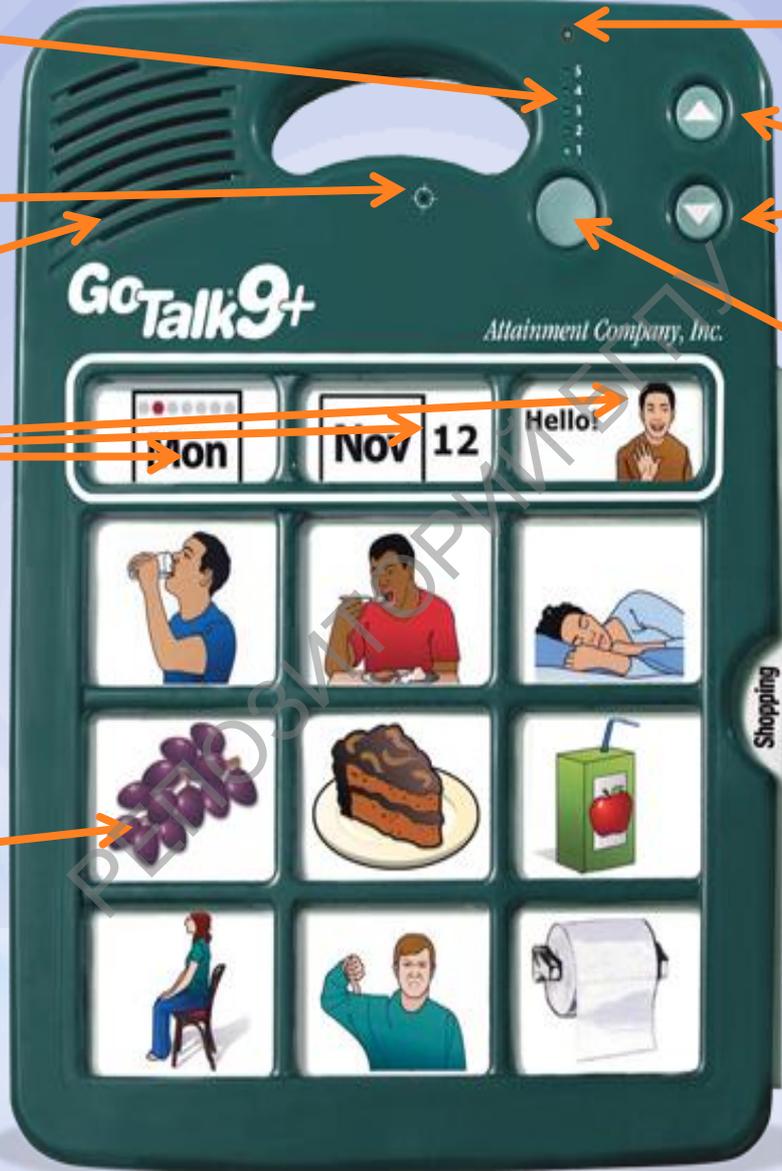

Итого
время записи:
8,5 минут
(510 секунд)

Размер: 9" x 12"

Для записи сообщения необходимо:

- включить GoTalk 9+ (прозвучит звуковой сигнал);
- нажать и отпустить кнопку записи (уровень LED (зеленый) и лампочка записи (красный) горит);
- нажать необходимую картинку, записать голосовое сообщение (пока идёт запись моргает красная лампочка);
- после записи голосового сообщения необходимо нажать любую клавишу, чтобы сохранить запись.



Воспроизведение сообщения

Для воспроизведения голосового сообщения необходимо нажать на нужную картинку и прозвучит записанное сообщение.

Чтобы изменить уровень, необходимо нажать и отпустить кнопку изменения уровня ниже зеленой лампочки. Она будет мигать.

Чтобы перейти к следующему уровню, необходимо нажать кнопку еще раз.

Чтобы удалить уровень, необходимо нажать и отпустить кнопку записи на обратной стороне устройства.

Создание накладок

Существует несколько способов сделать накладки для GoTalk 9+:

- использовать программное обеспечение GoTalk;
- записать слова на шаблон накладки маркером;
- вырезать/вставить фотографии или символ на шаблон накладки;
- с помощью липучки на каждый квадрат можно добавить подсказку для слабовидящих



КОММУНИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ГоуТок 9+ (GoTalk 9+)



Сороко Екатерина Николаевна,
зав. кафедрой коррекционно-развивающих
технологий ИИО БГПУ